


Instrucciones de uso
TRULICITY™ (Tru-li-si-ti)
(dulaglutide)

inyección, para uso subcutáneo

Pluma de dosis única de 0.75 mg/0.5 mL

una vez por semana

RETIRAR EL
SELLO

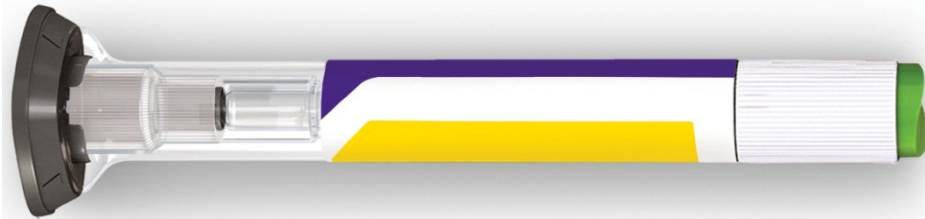

RETIRAR EL
SELLO

← Abrir y aplanar →



Leer ambos lados para obtener las instrucciones completas

Información acerca de TRULICITY Pluma de dosis única

Lea atentamente y de forma completa las Instrucciones de Uso y la Guía del Medicamento antes de usar la Pluma de dosis única TRULICITY. Converse con su proveedor de atención médica acerca de cómo inyectar correctamente TRULICITY.

- TRULICITY Pluma de dosis única (Pluma) es un dispositivo de administración de medicamentos precargado, descartable. Cada Pluma contiene 1 dosis de TRULICITY (0.75 mg/0.5 mL). Cada Pluma debe usarse 1 vez.
- **TRULICITY se administra 1 vez por semana.** Tal vez quiera marcar en su calendario un recordatorio de cuándo tomar la siguiente dosis.

Antes de empezar



Retire

Retire la Pluma del refrigerador.



Verifique

Verifique la etiqueta de la Pluma para asegurarse de que tiene el medicamento indicado y que no ha vencido.

Fecha de vencimiento



Inspeccione

Verifique la Pluma para estar seguro de que no está dañada e inspeccione el medicamento para garantizar que no está turbio, descolorido o que contiene partículas en el interior.





Prepare

Lávese las manos.


Elija el lugar para inyectarse

- Su proveedor de atención médica puede ayudarle a elegir el lugar de la inyección que sea más conveniente para usted.
- Puede inyectarse el medicamento en el estómago (abdomen) o muslo.
- Otra persona puede colocarle la inyección en la parte superior del brazo.
- Cambie (rote) el lugar de la inyección semanalmente. Puede usar la misma zona del cuerpo, pero asegúrese de elegir un lugar diferente para la inyección en esa zona.

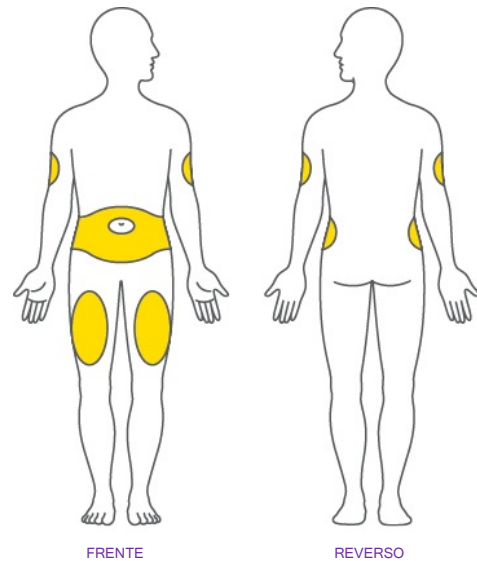

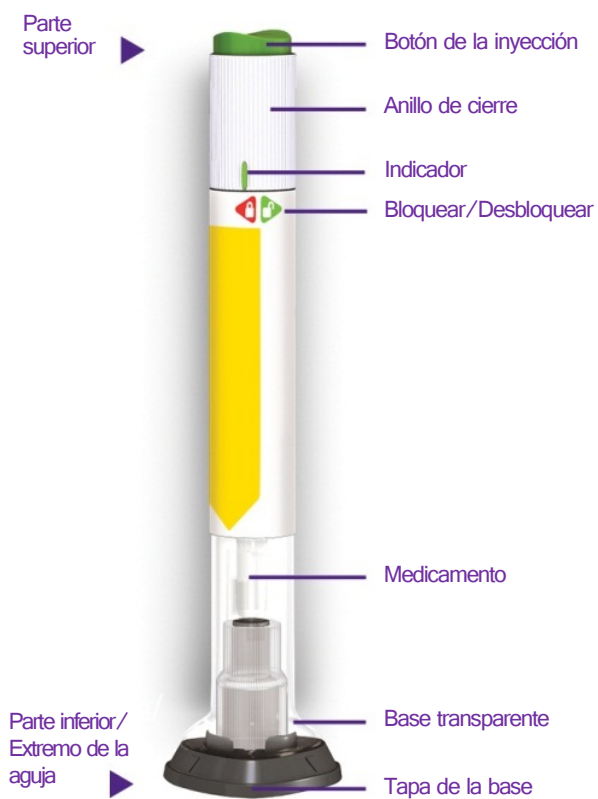


1 Destape la Pluma

 Asegúrese de que la Pluma esté **cerrada**.


- Quite la tapa de la base tirando firmemente de ella y arrójela a la basura de su hogar.


**No coloque nuevamente la tapa – podría dañar la aguja.
No toque la aguja.**

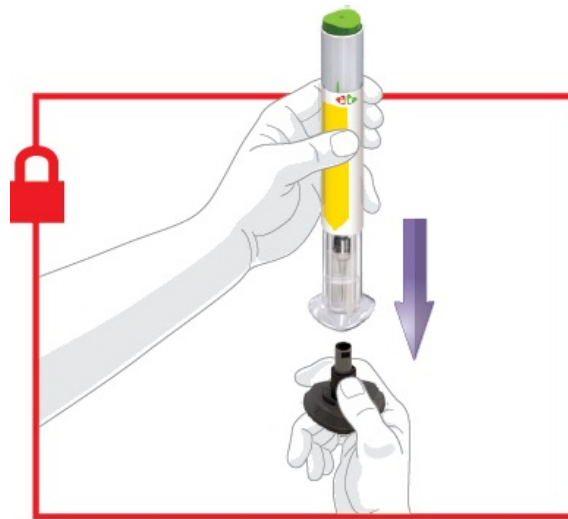

2 Coloque y abra


- Coloque la base transparente de forma plana y ajuste firmemente contra la piel en el lugar de la inyección.

 **Abra** girando el anillo de cierre.

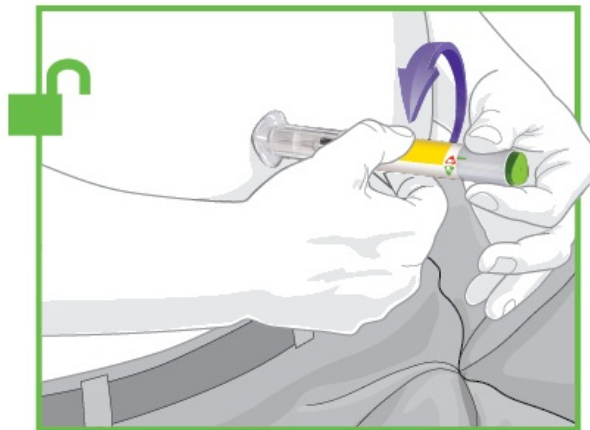


3 Presione y sostenga

- Presione y mantenga el botón verde de la inyección; escuchará un fuerte clic.

 Continúe manteniendo la base transparente firmemente contra su piel hasta escuchar un segundo clic. Esto sucede cuando la aguja comienza a retraerse en aproximadamente 5 a 10 segundos.

- Retire la Pluma de su piel.

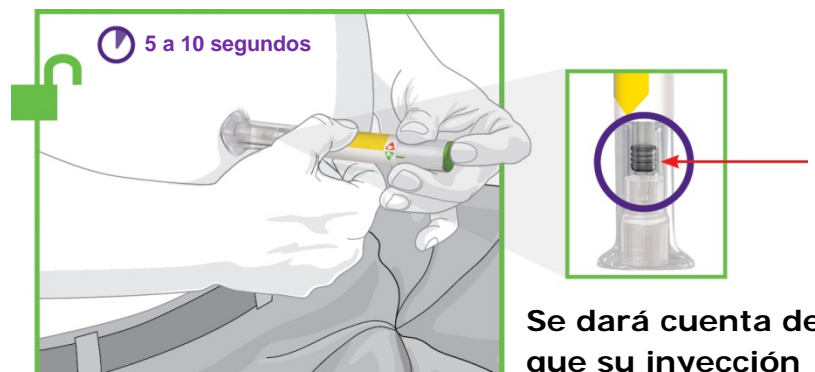

Se dará cuenta de que su inyección se administró de forma completa cuando el émbolo gris esté visible.

Información importante

Eliminación de la Pluma

Almacenamiento y manipulación

Preguntas Frecuentes

Otra información

Dónde obtener más información

Eliminación de sus Plumas usadas

- Coloque sus Plumas usadas en un recipiente para objetos punzocortantes aprobado por la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA) inmediatamente después de su uso. **No deseche (elimine) Plumas en la basura de su hogar.**
- Si no posee un recipiente para objetos punzocortantes aprobado por la FDA, puede usar un recipiente doméstico que:
 - esté hecho de plástico de alta resistencia,
 - pueda cerrarse con una tapa hermética, resistente a las perforaciones, sin que puedan salir objetos punzantes,
 - se mantenga estable y vertical durante el uso,
 - sea resistente a filtraciones, y
 - esté adecuadamente etiquetado con la advertencia de residuo peligroso en el interior del recipiente.
- Cuando su recipiente para objetos punzocortantes esté casi lleno, deberá seguir las directrices de su comunidad para la eliminación correcta de recipientes para objetos punzocortantes. Pueden existir leyes locales o estatales sobre cómo eliminar agujas y jeringas usadas. Para más información acerca de la eliminación segura de objetos punzocortantes y para obtener información específica sobre la eliminación de objetos punzocortantes en el Estado en el que vive, visite el sitio web de la FDA en: <http://www.fda.gov/safesharpsdisposal>.
- **No** recicle su recipiente para objetos punzocortantes.



Almacenamiento y manipulación

- Guarde su Pluma en el refrigerador entre 36°F y 46°F (2°C a 8°C).
- Puede almacenar su Pluma a temperatura ambiente inferior a 86°F (30°C) hasta un máximo de 14 días.
- No congele su Pluma. Si la Pluma se ha congelado, deséchela y use una nueva.
- Se recomienda almacenar su Pluma en la caja original. Proteja a su Pluma de la exposición directa al calor y la luz.
- La Pluma tiene partes de vidrio. Manipúlela cuidadosamente. Si la deja caer sobre una superficie dura, no la use. Use una nueva Pluma para su inyección.
- Mantenga su Pluma TRULICITY y todos los medicamentos lejos del alcance de los niños.

Preguntas Frecuentes

¿Qué pasa si veo una burbuja de aire en mi Pluma?

Las burbujas de aire son normales.

¿Qué pasa si desbloqueo la Pluma y presiono el botón verde de la inyección antes de quitar la tapa de la base?

No retire la tapa de la base. Tire la Pluma y use una nueva.

¿Qué pasa si hay una gota de líquido en la punta de la aguja cuando quito la tapa de la base?

Una gota de líquido en la punta de la aguja es normal.

¿Debo mantener presionado el botón de la inyección hasta administrar completamente la inyección?

No es necesario, pero puede ayudarle a mantener la Pluma firme y estable contra su piel.

Escuché más de 2 clics durante la inyección – 2 clic fuertes y 1 suave. ¿Me administré la inyección completa?

Algunos pacientes pueden escuchar un clic suave justo antes del segundo clic fuerte. Es el funcionamiento normal de la Pluma. No quite la Pluma de su piel hasta escuchar el segundo clic fuerte.

¿Qué pasa si hay una gota de líquido o sangre en mi piel después de aplicar la inyección?

Es normal.

No estoy seguro de que la Pluma funcione bien.

Verifique si ha recibido la dosis. Su dosis fue administrada correctamente si el émbolo gris es visible (*ver paso 3*). Comuníquese con Lilly al 1-800-Lilly-Rx (1-800-545-5979) o con su proveedor de atención médica para obtener más instrucciones. Hasta entonces, almacene su Pluma de forma segura para evitar un pinchazo accidental.

Otra información

- Si tiene problemas de visión, no use la Pluma sin ayuda de alguien capacitado para usar la Pluma TRULICITY.

Dónde obtener más información

- Si tiene preguntas o problemas con su Pluma de dosis única TRULICITY, comuníquese con Lilly al 1-800-Lilly-Rx (1-800-545-5979) o llame a su proveedor de atención médica.
- Para más información sobre la Pluma de dosis única TRULICITY, visite nuestro sitio web en: www.trulicity.com.



**ESCANEE ESTE
CÓDIGO PARA
INICIAR
www.trulicity.com**

Estas Instrucciones de Uso han sido aprobadas por la Administración de Medicamentos y Alimentos de los EE.UU.

Eli Lilly and Company
Indianapolis, IN 46285, USA
TRULICITY es marca registrada de Eli Lilly and Company.

Copyright © 2014, Eli Lilly and Company. Todos los derechos reservados.

La Pluma TRULICITY cumple con los requisitos actuales de funcionamiento y precisión en la dosis conforme a ISO 11608-1:2012 y 11608-5:2012.

Aprobado: SEP 18, 2014

TRULOAI-0001-IFU-20140918

Instrucciones de uso
TRULICITY™ (Tru-li-si-ti)
(dulaglutide)

inyección, para uso subcutáneo

Pluma de dosis única de 1.5 mg/0.5 mL

una vez por semana



← Abrir y aplanar →



Leer ambos lados para obtener las instrucciones completas

The Lilly logo, featuring the word "Lilly" in a red, cursive font.

Información acerca de TRULICITY Pluma de dosis única

Lea atentamente y de forma completa las Instrucciones de Uso y la Guía del Medicamento antes de usar la Pluma de dosis única TRULICITY. Converse con su proveedor de atención médica acerca de cómo inyectar correctamente TRULICITY.

- TRULICITY Pluma de dosis única (Pluma) es un dispositivo de administración de medicamentos precargado, descartable. Cada Pluma contiene 1 dosis de TRULICITY (1.5 mg/0.5 mL). Cada Pluma debe usarse 1 vez.
- **TRULICITY se administra 1 vez por semana.** Tal vez quiera marcar en su calendario un recordatorio de cuándo tomar la siguiente dosis.

Antes de empezar



Retire

Retire la Pluma del refrigerador.



Verifique

Verifique la etiqueta de la Pluma para asegurarse de que tiene el medicamento indicado y que no ha vencido.

Fecha de vencimiento



Inspeccione

Verifique la Pluma para estar seguro de que no está dañada e inspeccione el medicamento para garantizar que no está turbio, descolorido o que contiene partículas en el interior.




Prepare

Lávese las manos.

Elija el lugar para inyectarse


- Su proveedor de atención médica puede ayudarle a elegir el lugar de la inyección que sea más conveniente para usted.
- Puede inyectarse el medicamento en el estómago (abdomen) o muslo.
- Otra persona puede colocarle la inyección en la parte superior del brazo.
- Cambie (rote) el lugar de la inyección semanalmente. Puede usar la misma zona del cuerpo, pero asegúrese de elegir un lugar diferente para la inyección en esa zona.

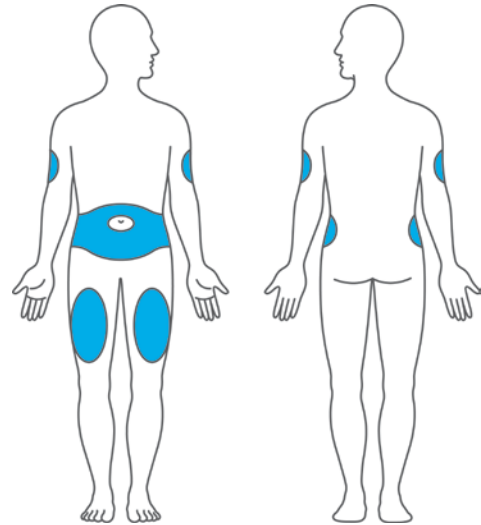


FRENTE

REVERSO

Parte superior ▶

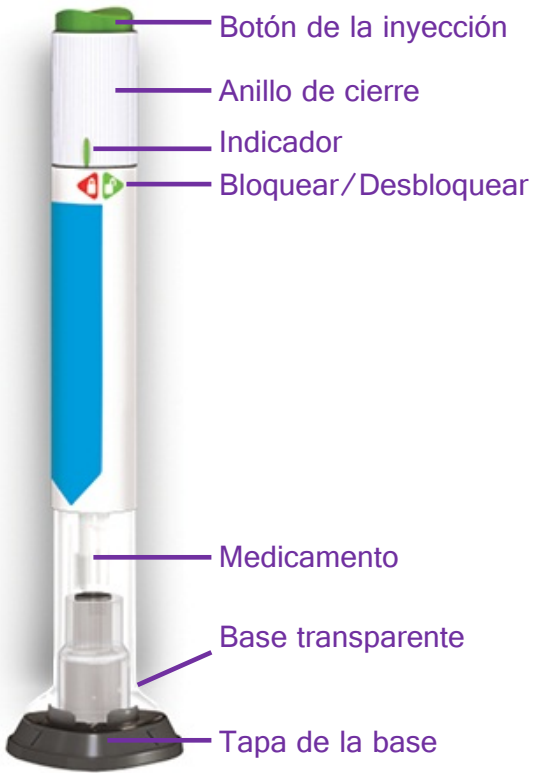


1 Destape la Pluma

 Asegúrese de que la Pluma esté **cerrada**.


- Quite la tapa de la base tirando firmemente de ella y arrójela a la basura de su hogar.


No coloque nuevamente la tapa – podría dañar la aguja.
No toque la aguja.

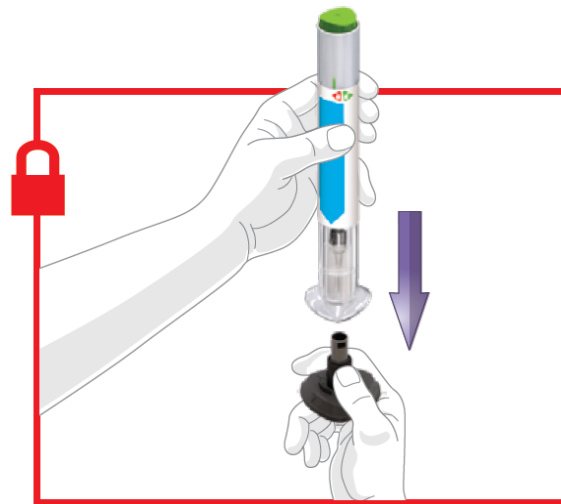

2 Coloque y abra


- Coloque la base transparente de forma plana y ajuste firmemente contra la piel en el lugar de la inyección.

 **Abra** girando el anillo de cierre.


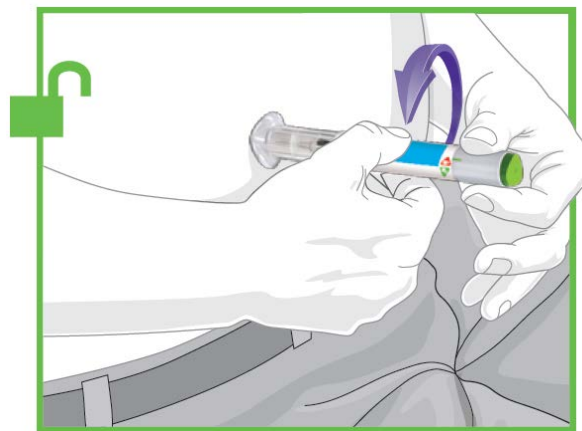


3 Presione y sostenga

- Presione y mantenga el botón verde de la inyección; escuchará un fuerte clic.

 Continúe manteniendo la base transparente firmemente contra su piel hasta escuchar un segundo clic. Esto sucede cuando la aguja comienza a retraerse en aproximadamente 5 a 10 segundos.

- Retire la Pluma de su piel.

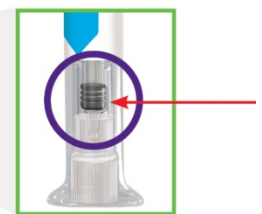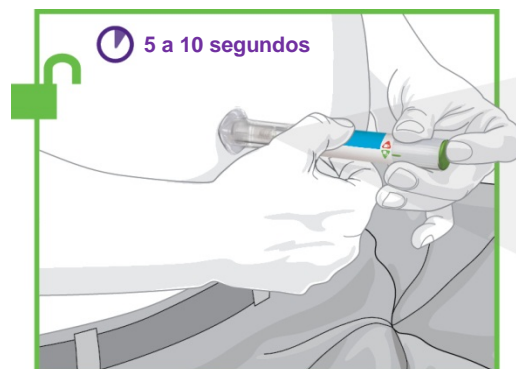

Se dará cuenta de que su inyección se administró de forma completa cuando el émbolo gris esté visible.

Información importante

Eliminación de la Pluma

Almacenamiento y manipulación

Preguntas Frecuentes

Otra información

Dónde obtener más información

Eliminación de sus Plumas usadas

- Coloque sus Plumas usadas en un recipiente para objetos punzocortantes aprobado por la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA) inmediatamente después de su uso. **No deseche (elimine) Plumas en la basura de su hogar.**
- Si no posee un recipiente para objetos punzocortantes aprobado por la FDA, puede usar un recipiente doméstico que:
 - esté hecho de plástico de alta resistencia,
 - pueda cerrarse con una tapa hermética, resistente a las perforaciones, sin que puedan salir objetos punzantes,
 - se mantenga estable y vertical durante el uso,
 - sea resistente a filtraciones, y
 - esté adecuadamente etiquetado con la advertencia de residuo peligroso en el interior del recipiente.
- Cuando su recipiente para objetos punzocortantes esté casi lleno, deberá seguir las directrices de su comunidad para la eliminación correcta de recipientes para objetos punzocortantes. Pueden existir leyes locales o estatales sobre cómo eliminar agujas y jeringas usadas. Para más información acerca de la eliminación segura de objetos punzocortantes y para obtener información específica sobre la eliminación de objetos punzocortantes en el Estado en el que vive, visite el sitio web de la FDA en: <http://www.fda.gov/safesharpsdisposal>.
- **No** recicle su recipiente para objetos punzocortantes.



Almacenamiento y manipulación

- Guarde su Pluma en el refrigerador entre 36°F y 46°F (2°C a 8°C).
- Puede almacenar su Pluma a temperatura ambiente inferior a 86°F (30°C) hasta un máximo de 14 días.
- No congele su Pluma. Si la Pluma se ha congelado, deséchela y use una nueva.
- Se recomienda almacenar su Pluma en la caja original. Proteja a su Pluma de la exposición directa al calor y la luz.
- La Pluma tiene partes de vidrio. Manipúlela cuidadosamente. Si la deja caer sobre una superficie dura, no la use. Use una nueva Pluma para su inyección.
- Mantenga su Pluma TRULICITY y todos los medicamentos lejos del alcance de los niños.

Preguntas Frecuentes

¿Qué pasa si veo una burbuja de aire en mi Pluma?

Las burbujas de aire son normales.

¿Qué pasa si desbloqueo la Pluma y presiono el botón verde de la inyección antes de quitar la tapa de la base?

No retire la tapa de la base. Tire la Pluma y use una nueva.

¿Qué pasa si hay una gota de líquido en la punta de la aguja cuando quito la tapa de la base?

Una gota de líquido en la punta de la aguja es normal.

¿Debo mantener presionado el botón de la inyección hasta administrar completamente la inyección?

No es necesario, pero puede ayudarle a mantener la Pluma firme y estable contra su piel.

Escuché más de 2 clics durante la inyección – 2 clic fuertes y 1 suave. ¿Me administré la inyección completa?

Algunos pacientes pueden escuchar un clic suave justo antes del segundo clic fuerte. Es el funcionamiento normal de la Pluma. No quite la Pluma de su piel hasta escuchar el segundo clic fuerte.

¿Qué pasa si hay una gota de líquido o sangre en mi piel después de aplicar la inyección?

Es normal.

No estoy seguro de que la Pluma funcione bien.

Verifique si ha recibido la dosis. Su dosis fue administrada correctamente si el émbolo gris es visible (*ver paso 3*). Comuníquese con Lilly al 1-800-Lilly-Rx (1-800-545-5979) o con su proveedor de atención médica para obtener más instrucciones. Hasta entonces, almacene su Pluma de forma segura para evitar un pinchazo accidental.

Otra información

- Si tiene problemas de visión, no use la Pluma sin ayuda de alguien capacitado para usar la Pluma TRULICITY.

Dónde obtener más información

- Si tiene preguntas o problemas con su Pluma de dosis única TRULICITY, comuníquese con Lilly al 1-800-Lilly-Rx (1-800-545-5979) o llame a su proveedor de atención médica.
- Para más información sobre la Pluma de dosis única TRULICITY, visite nuestro sitio web en: www.trulicity.com.



**ESCANEE ESTE CÓDIGO
PARA INICIAR
www.trulicity.com**

Estas Instrucciones de Uso han sido aprobadas por la Administración de Medicamentos y Alimentos de los EE.UU.

Eli Lilly and Company
Indianapolis, IN 46285, USA
TRULICITY es marca registrada de Eli Lilly and Company.

Copyright © 2014, Eli Lilly and Company. Todos los derechos reservados.

La Pluma TRULICITY cumple con los requisitos actuales de funcionamiento y precisión en la dosis conforme a ISO 11608-1:2012 y 11608-5:2012.

Aprobado: SEP 18, 2014

TRUHIAI-0001-IFU-20140918