

RETIRAR  
EL SELLO

## Instrucciones de Uso

RETIRAR  
EL SELLO

1

**TRULICITY®**  
(dulaglutida)

inyección para uso subcutáneo

Pluma de Dosis Única de 0.75 mg/0.5 ml

administrar 1 vez cada semana (una vez por semana)



← Abrir y aplanar →



Leer ambos lados para obtener las instrucciones completas

### Información acerca de la Pluma de Dosis Única TRULICITY

Lee atentamente y de forma completa las Instrucciones de Uso y la Guía del Medicamento antes de usar la Pluma de Dosis Única TRULICITY. Conversa con tu proveedor de atención médica acerca de cómo inyectar correctamente TRULICITY.

- La Pluma de Dosis Única TRULICITY es un dispositivo de administración de medicamento precargado y desechable. Cada Pluma contiene 1 dosis de TRULICITY (0.75 mg/0.5 ml). Cada Pluma debe usarse 1 vez.
- **TRULICITY se administra 1 vez por semana.** Recomendamos marcar en tu calendario un recordatorio de cuándo tomar la siguiente dosis.

### Antes de Empezar



#### Retirar

Retira la Pluma del refrigerador.  
Deja puesta la Tapa de la Base hasta que estés listo para inyectarte.



#### Verificar

Verifica la etiqueta de la Pluma para asegurarte de que tienes el medicamento indicado y que no ha vencido.



#### Inspeccionar


**Verifica la Pluma para asegurarte de que no está dañada** e inspecciona el medicamento para garantizar que no está turbio, descolorido o que contiene partículas en el interior.



#### Preparar


Lávate las manos.

Fecha de Caducidad

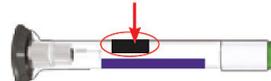


## Elige el Lugar para Inyectarte

Tu proveedor de atención médica puede ayudarte a elegir el lugar de inyección que sea más conveniente para ti.

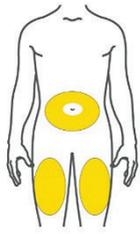


Cambia (varía) el lugar de la inyección semanalmente. Puedes usar la misma zona del cuerpo, pero asegúrate de elegir un lugar diferente para la inyección en esa zona.

Puedes inyectarte el medicamento en el estómago (abdomen) o muslo.

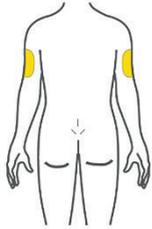

Otra persona debe administrarte la inyección en la zona posterior de la parte superior del brazo.

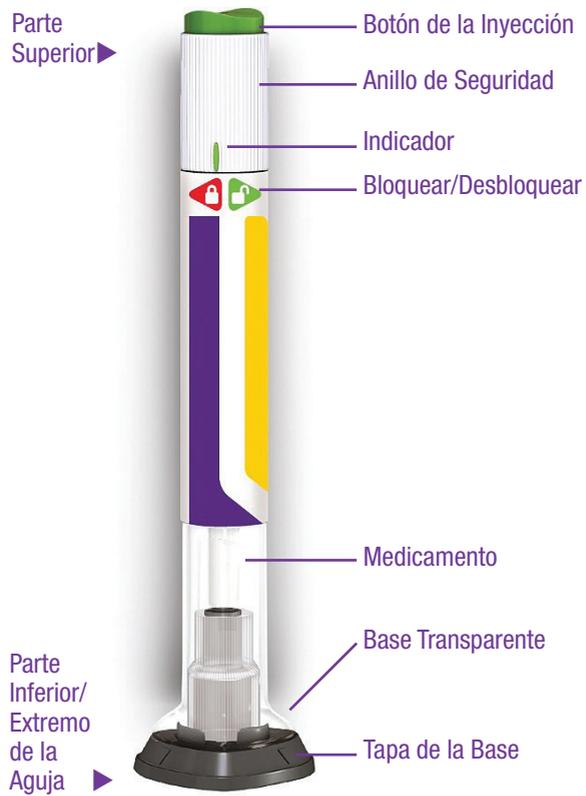


### Paso 1 Destapa la Pluma

 Asegúrate de que la Pluma esté **bloqueada**.

- Quita la Tapa de la Base tirando firmemente de ella y deséchala en la basura de tu hogar.

**No vuelvas a colocar la Tapa de la Base, ya que la aguja se podría dañar.**


**No toques la aguja.**

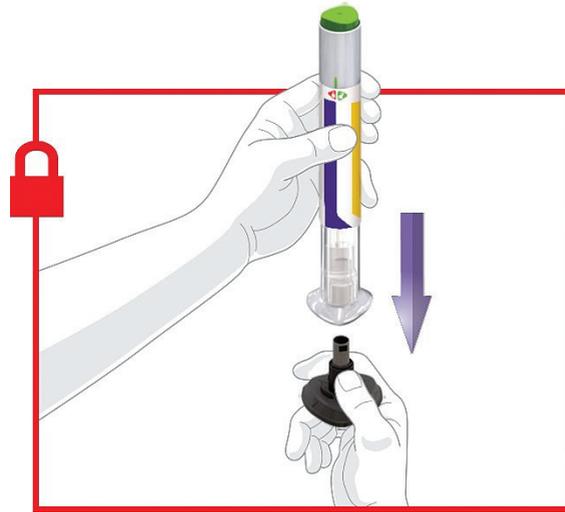

### Paso 2 Posiciona y Desbloquea

- Coloca la Base Transparente de forma plana y firme contra la piel en la zona de inyección.

 **Desbloquea** la Pluma girando el Anillo de Seguridad.

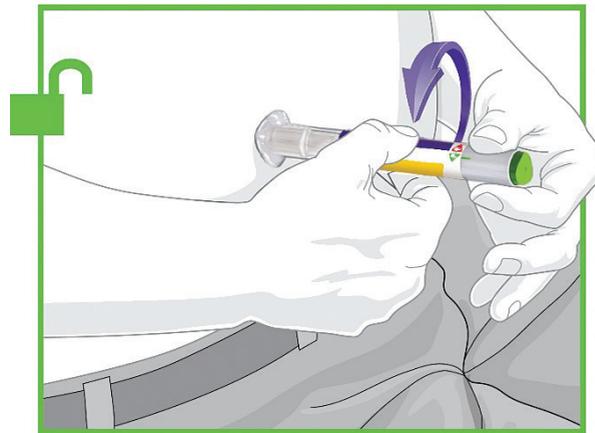


### Paso 3 Presiona y Mantiene

- Mantén presionado el Botón verde de Inyección. Escucharás un clic fuerte.

 Continúa presionando la Base Transparente de manera firme contra tu piel hasta oír un segundo clic. Esto sucede cuando la aguja comienza a retraerse en aproximadamente de 5 a 10 segundos.

- Retira la Pluma de tu piel.

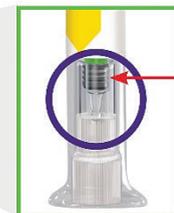

**Sabrás que te has administrado la inyección de forma completa cuando veas el émbolo gris.**

## Información Importante

Eliminación de la Pluma

Almacenamiento y Manipulación

Preguntas Frecuentes

Otra Información

Dónde Obtener Más Información

## Eliminación de tus Plumas Usadas

- Coloca tus Plumas usadas en un recipiente para objetos punzocortantes aprobado por la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA, por sus siglas en inglés) inmediatamente después de su uso. **No deseches (elimines) Plumas en la basura de tu hogar.**
- Si no dispones de un recipiente para la eliminación de objetos punzocortantes aprobado por la FDA, puedes utilizar un recipiente doméstico que cumpla con los siguientes requisitos:
  - que esté hecho de plástico de alta resistencia;
  - que pueda cerrarse con una tapa ajustada y sea resistente a las perforaciones, de modo que los objetos punzocortantes no se puedan salir;
  - que pueda colocarse en posición vertical y mantenerse estable durante el uso;
  - que sea resistente a derrames; y
  - que esté adecuadamente etiquetado con la advertencia de que hay residuos peligrosos en el interior del recipiente.
- Cuando tu recipiente para la eliminación de objetos punzocortantes esté casi lleno, deberás seguir las normas comunitarias para desecharlo de manera correcta. Pueden existir leyes locales o estatales sobre cómo desechar agujas y jeringas usadas. Para obtener más información sobre la eliminación segura de objetos punzocortantes e información específica sobre el desecho de objetos punzocortantes en el estado en el que resides, visita la página web de la FDA: <http://www.fda.gov/safesharpsdisposal>.
- **No** recicles el recipiente utilizado.



## Almacenamiento y Manipulación

- Guarda tu Pluma en el refrigerador entre 36 °F y 46 °F (2 °C a 8 °C).
- Puedes almacenar tu Pluma a una temperatura ambiente inferior a 86 °F (30 °C) hasta un máximo de 14 días.
- No congeles tu Pluma. Si la Pluma se ha congelado, deséchala y usa una nueva.
- Se recomienda almacenar tu Pluma en la caja original. Protege tu Pluma de la exposición directa al calor y la luz.
- La Pluma tiene piezas de vidrio. Manipúlala con cuidado. Si se cae sobre una superficie dura, no la uses. Usa una nueva Pluma para tu inyección.
- Mantén tu Pluma TRULICITY y todos los medicamentos fuera del alcance de los niños.

## Preguntas Frecuentes

### ¿Qué sucede si veo burbujas de aire en mi Pluma?

Las burbujas de aire son normales.

### ¿Qué pasa si desbloqueo la Pluma y presiono el Botón verde de la Inyección antes de quitar la Tapa de la Base?

No retires la Tapa de la Base. Desecha la Pluma y usa una nueva.

### ¿Qué pasa si hay una gota de líquido en la punta de la aguja cuando quito la Tapa de la Base?

Una gota de líquido en la punta de la aguja es normal.

**¿Debo mantener presionado el Botón de la Inyección hasta administrar completamente la inyección?**

No es necesario, pero puede ayudarte a mantener la Pluma firme y estable contra tu piel.

**Escuché más de 2 clics durante la inyección: 2 clic fuertes y 1 suave. ¿Me administré la inyección completa?**

Es posible que algunos pacientes escuchen un clic suave justo antes del segundo clic fuerte. Es el funcionamiento normal de la Pluma. No retires la Pluma de tu piel hasta escuchar el segundo clic fuerte.

**¿Qué pasa si hay una gota de líquido o sangre en mi piel después de aplicar la inyección?**

Es normal.

**No estoy seguro de que la Pluma funcionó correctamente.**

Verifica si recibiste la dosis. Tu dosis se administró correctamente si el émbolo gris es visible (*ver paso 3*). También puedes comunicarte con Lilly al 1-800-Lilly-Rx (1-800-545-5979) para obtener más instrucciones. Hasta entonces, almacena tu Pluma de forma segura para evitar un pinchazo accidental.

**Otra Información**

- Si tienes problemas de visión, no uses la Pluma sin ayuda de alguien capacitado para usar la Pluma TRULICITY.

**Dónde Obtener Más Información**

- Si tienes preguntas o problemas con tu Pluma de Dosis Única TRULICITY, comunícate con Lilly al 1-800-Lilly-Rx (1-800-545-5979) o llama a tu profesional de la salud.
- Para obtener más información sobre la Pluma de Dosis Única TRULICITY, visita nuestro sitio web en: [www.trulicity.com](http://www.trulicity.com).



**ESCANEA ESTE CÓDIGO PARA ACCEDER**  
**[www.trulicity.com](http://www.trulicity.com)**

Estas Instrucciones de Uso cuentan con la aprobación de la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos.

*Lilly*

Eli Lilly and Company  
Indianápolis, IN 46285, EE. UU.  
Número de Licencia en Estados Unidos 1891  
TRULICITY es una marca comercial de Eli Lilly and Company.

Derechos de autor © 2014, 2022, Eli Lilly and Company. Todos los derechos reservados.

La Pluma TRULICITY cumple con los requisitos actuales de funcionamiento y precisión en la dosis conforme a las normas ISO 11608-1:2012 y 11608-5:2012.

Revisión: 11/2022

TRULOAI-0004-IFU-20221117

PP-DG-US-4747

RETIRAR  
EL SELLO


## Instrucciones de Uso

RETIRAR 6  
EL SELLO

**TRULICITY®**  
(dulaglutida)

inyección para uso subcutáneo

Pluma de Dosis Única de 1.5 mg/0.5 ml  
administrar 1 vez cada semana (una vez por semana)

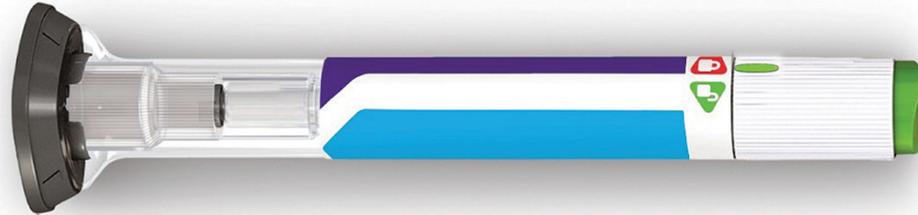

← Abrir y aplanar →



Leer ambos lados para obtener las instrucciones completas

### Información acerca de la Pluma de Dosis Única TRULICITY

Lee atentamente y de forma completa las Instrucciones de Uso y la Guía del Medicamento antes de usar la Pluma de Dosis Única TRULICITY. Conversa con tu proveedor de atención médica acerca de cómo inyectar correctamente TRULICITY.

- La Pluma de Dosis Única TRULICITY es un dispositivo de administración de medicamento precargado y desechable. Cada Pluma contiene 1 dosis de TRULICITY (1.5 mg/0.5 ml). Cada Pluma debe usarse 1 vez.
- **TRULICITY se administra 1 vez por semana.** Recomendamos marcar en tu calendario un recordatorio de cuándo tomar la siguiente dosis.

### Antes de Empezar



#### Retirar

Retira la Pluma del refrigerador.  
Deja puesta la Tapa de la Base hasta que estés listo para inyectarte.



#### Verificar

Verifica la etiqueta de la Pluma para asegurarte de que tienes el medicamento indicado y que no ha vencido.



#### Inspeccionar


**Verifica la Pluma para asegurarte de que no está dañada** e inspecciona el medicamento para garantizar que no está turbio, descolorido o que contiene partículas en el interior.



#### Preparar


Lávate las manos.

Fecha de Caducidad

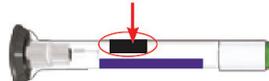


## Elige el Lugar para Inyectarte

Tu proveedor de atención médica puede ayudarte a elegir el lugar de inyección que sea más conveniente para ti.

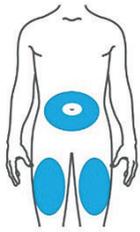


Cambia (varía) el lugar de la inyección semanalmente. Puedes usar la misma zona del cuerpo, pero asegúrate de elegir un lugar diferente para la inyección en esa zona.

Puedes inyectarte el medicamento en el estómago (abdomen) o muslo.

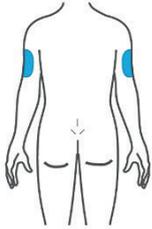

Otra persona debe administrarte la inyección en la zona posterior de la parte superior del brazo.

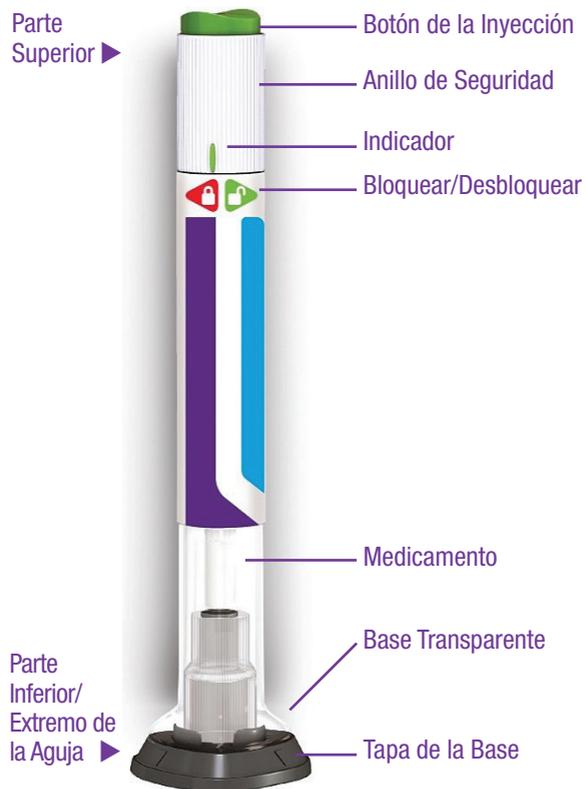


### Paso 1 Destapa la Pluma

 Asegúrate de que la Pluma esté **bloqueada**.

- Quita la Tapa de la Base tirando firmemente de ella y deséchala en la basura de tu hogar.

**No vuelvas a colocar la Tapa de la Base, ya que la aguja se podría dañar.**

**No toques la aguja.**

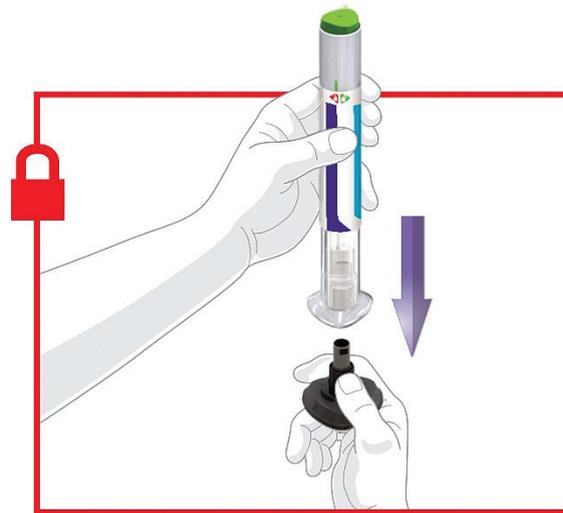

### Paso 2 Posiciona y Desbloquea


- Coloca la Base Transparente de forma plana y firme contra la piel en la zona de inyección.

 **Desbloquea** la Pluma girando el Anillo de Seguridad.



### Paso 3 Presiona y Mantiene

- Mantén presionado el Botón verde de Inyección. Escucharás un clic fuerte.
-  Continúa presionando la Base Transparente de manera firme contra tu piel hasta oír un segundo clic. Esto sucede cuando la aguja comienza a retraerse en aproximadamente de 5 a 10 segundos.
- Retira la Pluma de tu piel.

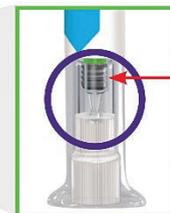

**Sabrás que te has administrado la inyección de forma completa cuando veas el émbolo gris.**

## Información Importante

Eliminación de la Pluma

Almacenamiento y Manipulación

Preguntas Frecuentes

Otra Información

Dónde Obtener Más Información

### Eliminación de tus Plumas Usadas

- Coloca tus Plumas usadas en un recipiente para objetos punzocortantes aprobado por la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA, por sus siglas en inglés) inmediatamente después de su uso. **No deseches (elimines) Plumas en la basura de tu hogar.**
- Si no dispones de un recipiente para la eliminación de objetos punzocortantes aprobado por la FDA, puedes utilizar un recipiente doméstico que cumpla con los siguientes requisitos:
  - que esté hecho de plástico de alta resistencia;
  - que pueda cerrarse con una tapa ajustada y sea resistente a las perforaciones, de modo que los objetos punzocortantes no se puedan salir;
  - que pueda colocarse en posición vertical y mantenerse estable durante el uso;
  - que sea resistente a derrames; y
  - que esté adecuadamente etiquetado con la advertencia de que hay residuos peligrosos en el interior del recipiente.
- Cuando tu recipiente para la eliminación de objetos punzocortantes esté casi lleno, deberás seguir las normas comunitarias para desecharlo de manera correcta. Pueden existir leyes locales o estatales sobre cómo desechar agujas y jeringas usadas. Para obtener más información sobre la eliminación segura de objetos punzocortantes e información específica sobre el desecho de objetos punzocortantes en el estado en el que resides, visita la página web de la FDA: <http://www.fda.gov/safesharpsdisposal>.
- **No recicles el recipiente utilizado.**



### Almacenamiento y Manipulación

- Guarda tu Pluma en el refrigerador entre 36 °F y 46 °F (2 °C a 8 °C).
- Puedes almacenar tu Pluma a una temperatura ambiente inferior a 86 °F (30 °C) hasta un máximo de 14 días.
- No congeles tu Pluma. Si la Pluma se ha congelado, deséchala y usa una nueva.
- Se recomienda almacenar tu Pluma en la caja original. Protege tu Pluma de la exposición directa al calor y la luz.
- La Pluma tiene piezas de vidrio. Manipúlala con cuidado. Si se cae sobre una superficie dura, no la uses. Usa una nueva Pluma para tu inyección.
- Mantén tu Pluma TRULICITY y todos los medicamentos fuera del alcance de los niños.

### Preguntas Frecuentes

#### ¿Qué sucede si veo burbujas de aire en mi Pluma?

Las burbujas de aire son normales.

#### ¿Qué pasa si desbloqueo la Pluma y presiono el Botón verde de la Inyección antes de quitar la Tapa de la Base?

No retires la Tapa de la Base. Desecha la Pluma y usa una nueva.

#### ¿Qué pasa si hay una gota de líquido en la punta de la aguja cuando quito la Tapa de la Base?

Una gota de líquido en la punta de la aguja es normal.

**¿Debo mantener presionado el Botón de la Inyección hasta administrar completamente la inyección?**

No es necesario, pero puede ayudarte a mantener la Pluma firme y estable contra tu piel.

**Escuché más de 2 clics durante la inyección: 2 clic fuertes y 1 suave. ¿Me administré la inyección completa?**

Es posible que algunos pacientes escuchen un clic suave justo antes del segundo clic fuerte. Es el funcionamiento normal de la Pluma. No retires la Pluma de tu piel hasta escuchar el segundo clic fuerte.

**¿Qué pasa si hay una gota de líquido o sangre en mi piel después de aplicar la inyección?**

Es normal.

**No estoy seguro de que la Pluma funcionó correctamente.**

Verifica si recibiste la dosis. Tu dosis se administró correctamente si el émbolo gris es visible (*ver paso 3*). También puedes comunicarte con Lilly al 1-800-Lilly-Rx (1-800-545-5979) para obtener más instrucciones. Hasta entonces, almacena tu Pluma de forma segura para evitar un pinchazo accidental.

**Otra Información**

- Si tienes problemas de visión, no uses la Pluma sin ayuda de alguien capacitado para usar la Pluma TRULICITY.

**Dónde Obtener Más Información**

- Si tienes preguntas o problemas con tu Pluma de Dosis Única TRULICITY, comunícate con Lilly al 1-800-Lilly-Rx (1-800-545-5979) o llama a tu profesional de la salud.
- Para obtener más información sobre la Pluma de Dosis Única TRULICITY, visita nuestro sitio web en: [www.trulicity.com](http://www.trulicity.com).



**ESCANEA ESTE CÓDIGO PARA ACCEDER**  
**[www.trulicity.com](http://www.trulicity.com)**

Estas Instrucciones de Uso cuentan con la aprobación de la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos.

*Lilly*

Eli Lilly and Company  
Indianápolis, IN 46285, EE. UU.  
Número de Licencia en Estados Unidos 1891  
TRULICITY es una marca comercial de Eli Lilly and Company.

Derechos de autor © 2014, 2022, Eli Lilly and Company. Todos los derechos reservados.

La Pluma TRULICITY cumple con los requisitos actuales de funcionamiento y precisión en la dosis conforme a las normas ISO 11608-1:2012 y 11608-5:2012.

Revisión: 11/2022

TRUHIAI-0004-IFU-20221117

PP-DG-US-4748

RETIRAR  
EL SELLO

**Instrucciones de Uso**  
**TRULICITY® (TRU-lí-si-ti)**  
**(dulaglutida)**

RETIRAR  
EL SELLO

**inyección, para uso subcutáneo**  
**Pluma de Dosis Única de 3 mg/0.5 ml**  
**para administrar 1 vez por semana (una vez a la semana)**



← Abrir y aplanar →



Leer ambos lados para obtener las instrucciones completas



**Información acerca de la Pluma de Dosis Única TRULICITY**

**Lea atentamente y de forma completa las Instrucciones de Uso y la Guía del Medicamento antes de usar la Pluma de Dosis Única TRULICITY. Converse con su proveedor de atención médica acerca de cómo inyectar correctamente TRULICITY.**

- TRULICITY pluma de dosis única (pluma) es un dispositivo de administración de medicamentos precargado, descartable. Cada pluma contiene 1 dosis de TRULICITY (3 mg/0.5 ml). Cada pluma debe usarse 1 vez.
- **TRULICITY se administra 1 vez por semana.** Tal vez quiera marcar en su calendario un recordatorio de cuándo tomar la siguiente dosis.

**Antes de empezar**



**Retire**


Retire la pluma del refrigerador.  
Deje la tapa puesta hasta que esté listo para inyectar.



**Verifique**

Verifique la etiqueta de la pluma para asegurarse de que tiene el medicamento indicado y que no ha vencido.

Fecha de vencimiento

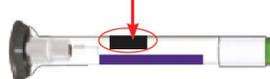

**Inspeccione**

Verifique la pluma para estar seguro de que no está dañada e inspeccione el medicamento para garantizar que no está turbio, descolorido o que contiene partículas en el interior.





**Prepare**

Lávese las manos.

### Elija el lugar para inyectarse

- Su proveedor de servicios médicos puede ayudarlo a elegir el lugar de la inyección que sea más adecuado para usted.
- Puede inyectar el medicamento en su estómago (abdomen) o en el muslo.
- Otra persona puede aplicarle la inyección en la parte superior del brazo.
- Cambie (rote) el lugar de la inyección semanalmente. Puede usar la misma zona del cuerpo, pero asegúrese de elegir un lugar diferente para la inyección en esa zona.

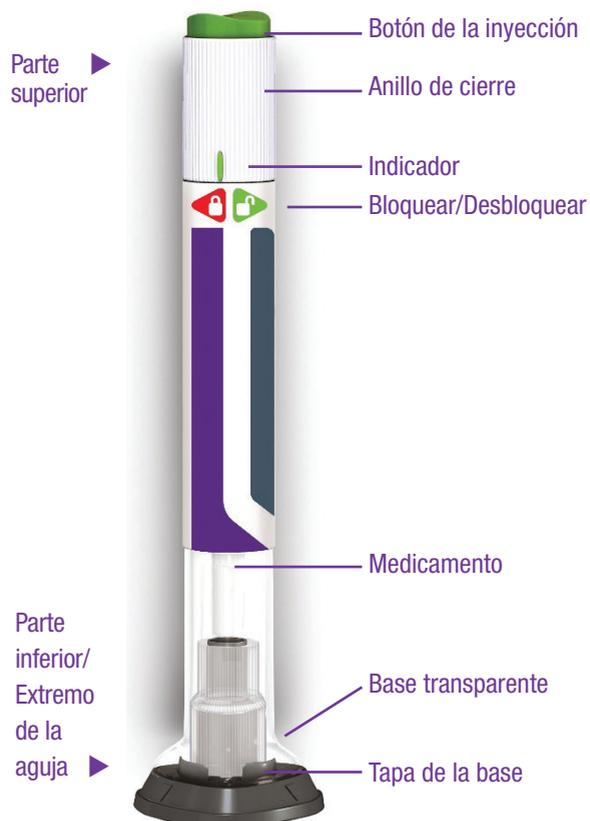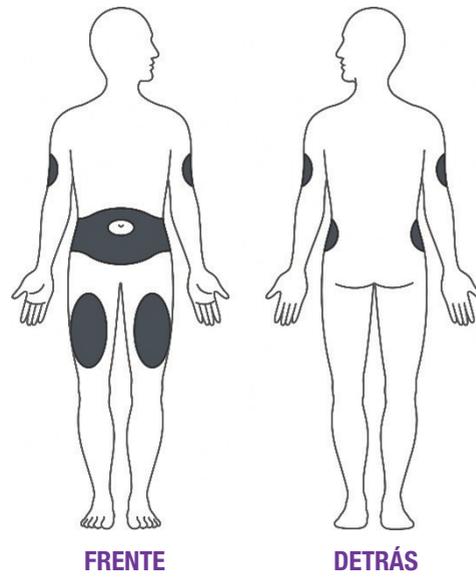

### Paso 1 Destape la pluma




Asegúrese de que la pluma esté **bloqueada**.

- Quite la tapa de la base tirando firmemente de ella y deséchela con la basura de su hogar.

**No coloque nuevamente la tapa, podría dañar la aguja.**

**No toque la aguja.**

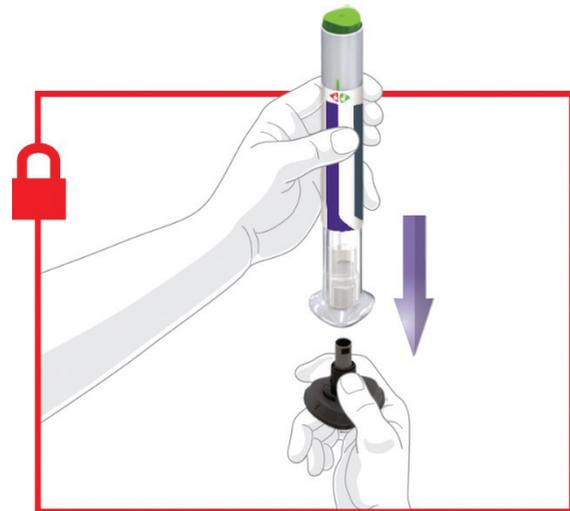


### Paso 2 Coloque y abra

- Coloque la base transparente de forma plana y presione firmemente contra la piel en el lugar de la inyección.




**Abra** girando el anillo de cierre.

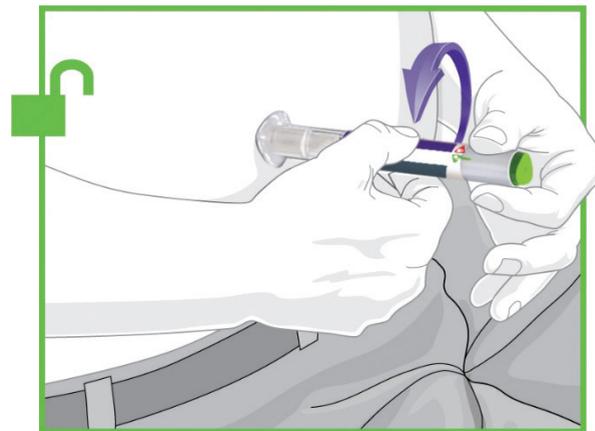

### Paso 3 Presione y sostenga

- Presione y mantenga presionado el botón de inyección verde. Oirá un clic fuerte.
- ⚠ Continúe manteniendo la base transparente firmemente contra su piel hasta escuchar un segundo clic. Esto sucede cuando la aguja comienza a retraerse en aproximadamente 5-10 segundos.
- Retire la pluma de su piel.

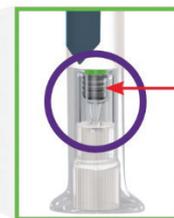

**Sabrás que se ha administrado la inyección de forma completa cuando vea el émbolo gris.**

## Información importante

Eliminación de la pluma

Almacenamiento y Manejo

Preguntas Frecuentes

Otra información

Dónde obtener más información

## Eliminación de sus Plumas usadas

- Coloque sus plumas usadas en un recipiente para objetos punzocortantes aprobado por la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA) inmediatamente después de su uso. **No deseche (elimine) Plumas en la basura de su hogar.**
- Si no dispone de un recipiente para eliminación de objetos punzocortantes aprobado por la FDA, puede usar un recipiente doméstico que cumpla con los siguientes requisitos:
  - esté hecho de plástico de alta resistencia;
  - pueda cerrarse con una tapa ajustada y ser resistente a las perforaciones, de modo que los objetos punzantes no se puedan salir;
  - pueda colocarse en posición vertical y ser estable durante el uso;
  - sea resistente a derrames; y
  - tenga una etiqueta que advierta que el recipiente contiene residuos peligrosos.
- Cuando su recipiente para eliminación de objetos punzantes esté casi lleno, deberá seguir las normas de la comunidad para desechar su recipiente correctamente. Pueden existir leyes locales o estatales sobre cómo eliminar agujas y jeringas usadas. Para obtener más información sobre la eliminación segura de objetos punzantes e información específica sobre la eliminación de objetos punzantes en el estado en el que reside, visite la página web de la FDA: <http://www.fda.gov/safesharpsdisposal>.
- **No recicle el recipiente usado.**



## Almacenamiento y Manejo

- Guarde su pluma en el refrigerador entre 36 °F y 46 °F (2 °C a 8 °C).
- Puede almacenar su pluma a temperatura ambiente inferior a 86 °F (30 °C) hasta un máximo de 14 días.
- No congele su pluma. Si la pluma se ha congelado, deséchela y use una nueva.
- Se recomienda almacenar su pluma en la caja original. Proteja la pluma de la exposición directa al calor y la luz.
- La pluma tiene partes de vidrio. Manipúlela con cuidado. Si la deja caer sobre una superficie dura, no la use. Use una nueva pluma para su inyección.
- Mantenga su pluma TRULICITY y todos los medicamentos lejos del alcance de los niños.

## Preguntas Frecuentes

### ¿Qué pasa si veo burbujas de aire en mi pluma?

Las burbujas de aire son normales.

### ¿Qué pasa si desbloqueo la pluma y presiono el botón verde de la inyección antes de quitar la tapa de la base?

No retire la tapa de la base. Tire la pluma y use una nueva.

**¿Qué pasa si hay una gota de líquido en la punta de la aguja cuando quito la tapa de la base?**

Una gota de líquido en la punta de la aguja es normal.

**¿Debo mantener presionado el botón de la inyección hasta administrar completamente la inyección?**

No es necesario, pero puede ayudarlo a mantener la pluma firme y estable contra su piel

**Escuché más de 2 clics durante la inyección – 2 clic fuertes y 1 suave. ¿Me administré la inyección completa?**

Algunas personas pueden escuchar un clic suave justo antes del segundo clic fuerte. Es el funcionamiento normal de la pluma. No quite la pluma de su piel hasta escuchar el segundo clic fuerte.

**¿Qué pasa si hay una gota de líquido o sangre en mi piel después de aplicar la inyección?**

Es normal.

**No estoy seguro de que la pluma funcione bien.**

Verifique si ha recibido la dosis. Su dosis se administró correctamente si el émbolo gris es visible (*ver paso 3*). Comuníquese con Lilly al 1-800-Lilly-Rx (1-800-545-5979) para obtener más instrucciones. Hasta entonces, almacene su pluma de forma segura para evitar un pinchazo accidental.

**Otra información**

- Si tiene problemas de visión, no use la pluma sin ayuda de alguien capacitado para usar la pluma TRULICITY.

**Dónde obtener más información**

- Si tiene preguntas o problemas con su pluma de dosis única TRULICITY, comuníquese con Lilly al 1-800-Lilly-Rx (1-800-545-5979) o llame a su proveedor de atención médica.
- Para ver más información sobre la pluma de dosis única TRULICITY, visite nuestro sitio web en: [www.trulicity.com](http://www.trulicity.com).

Estas Instrucciones de Uso han sido aprobadas por la Administración de Medicamentos y Alimentos de EE. UU.



Eli Lilly and Company

Indianápolis, IN 46285, USA

Número de licencia en Estados Unidos 1891

TRULICITY es una marca registrada de Eli Lilly and Company.

Copyright © 2020, Eli Lilly and Company. Todos los derechos reservados.

La pluma TRULICITY cumple con los requisitos actuales de funcionamiento y precisión en la dosis conforme a ISO 11608-1:2012 y 11608-5:2012.

Aprobado: 09/2020


TRU3MG-0001-IFU-20200903

RETIRAR  
EL SELLO

**Instrucciones de Uso**  
**TRULICITY® (TRU-lí-si-ti)**  
**(dulaglutida)**

RETIRAR  
EL SELLO

**inyección, para uso subcutáneo**  
**Pluma de Dosis Única de 4.5 mg/0.5 ml**  
**para administrar 1 vez por semana (una vez a la semana)**

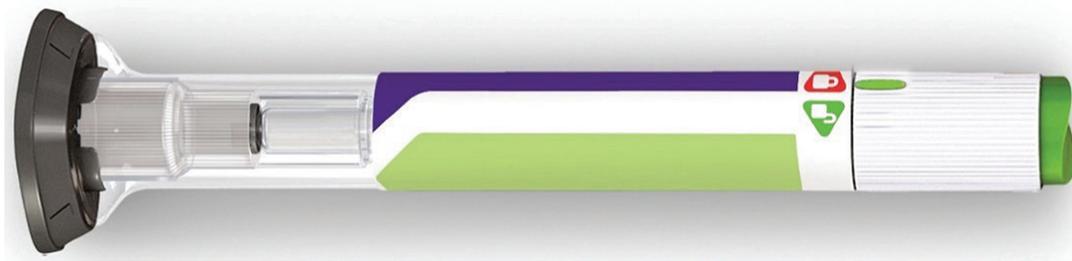

←Abrir y aplanar→



Leer ambos lados para obtener las instrucciones completas



**Información acerca de la Pluma de Dosis Única TRULICITY**

**Lea atentamente y de forma completa las Instrucciones de Uso y la Guía del Medicamento antes de usar la Pluma de Dosis Única TRULICITY. Converse con su proveedor de atención médica acerca de cómo inyectar correctamente TRULICITY.**

- TRULICITY pluma de dosis única (pluma) es un dispositivo de administración de medicamentos precargado, descartable. Cada pluma contiene 1 dosis de TRULICITY (4.5 mg/0.5 ml). Cada pluma debe usarse 1 vez.
- **TRULICITY se administra 1 vez por semana.** Tal vez quiera marcar en su calendario un recordatorio de cuándo tomar la siguiente dosis.

**Antes de empezar**



**Retire**


Retire la pluma del refrigerador.  
Deje la tapa puesta hasta que esté listo para inyectar.



**Verifique**

Verifique la etiqueta de la pluma para asegurarse de que tiene el medicamento indicado y que no ha vencido.

Fecha de vencimiento

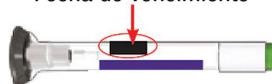

**Inspeccione**

Verifique la pluma para estar seguro de que no está dañada e inspeccione el medicamento para garantizar que no está turbio, descolorido o que contiene partículas en el interior.





**Prepare**

Lávese las manos.

### Elija el lugar para inyectarse

- Su proveedor de servicios médicos puede ayudarlo a elegir el lugar de la inyección que sea más adecuado para usted.
- Puede inyectar el medicamento en su estómago (abdomen) o en el muslo.
- Otra persona puede aplicarle la inyección en la parte superior del brazo.
- Cambie (rote) el lugar de la inyección semanalmente. Puede usar la misma zona del cuerpo, pero asegúrese de elegir un lugar diferente para la inyección en esa zona.

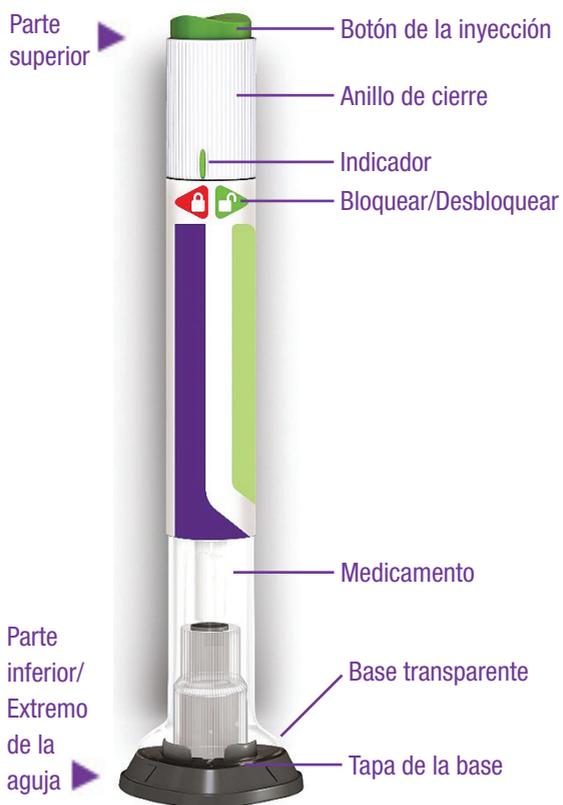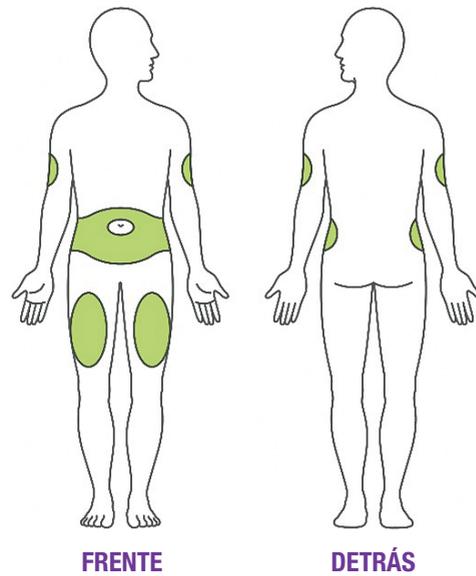

### Paso 1 Destape la pluma




Asegúrese de que la pluma esté **bloqueada**.

- Quite la tapa de la base tirando firmemente de ella y deséchela con la basura de su hogar.

**No coloque nuevamente la tapa; podría dañar la aguja.**

**No toque la aguja.**

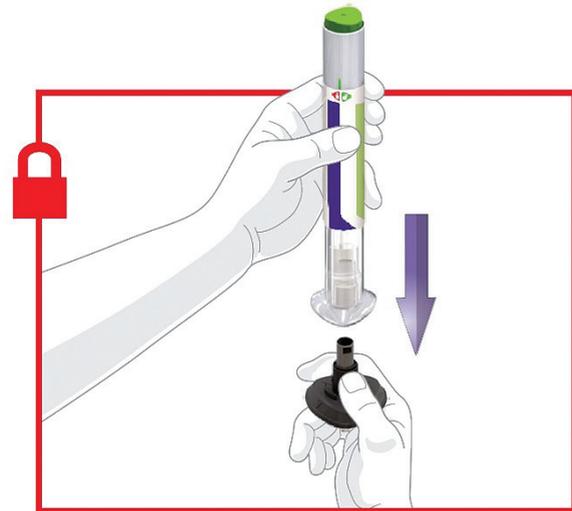


### Paso 2 Coloque y abra

- Coloque la base transparente de forma plana y presione firmemente contra la piel en el lugar de la inyección.




**Abra** girando el anillo de cierre.

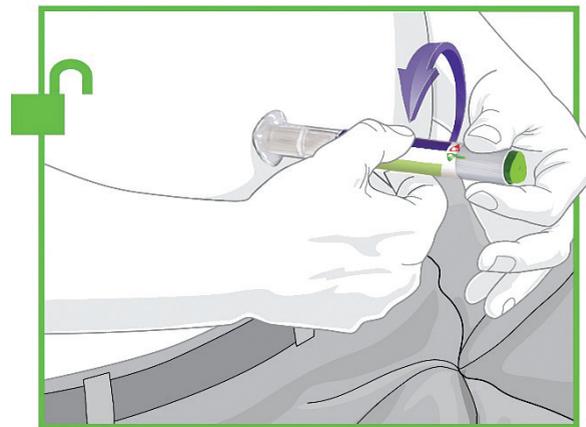

### Paso 3 Presione y sostenga

- Presione y mantenga presionado el botón de inyección verde. Oirá un clic fuerte.
- ⚠ Continúe manteniendo la base transparente firmemente contra su piel hasta escuchar un segundo clic. Esto sucede cuando la aguja comienza a retraerse en aproximadamente 5-10 segundos.
- Retire la pluma de su piel.

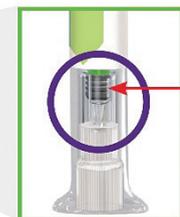

**Sabrás que se ha administrado la inyección de forma completa cuando vea el émbolo gris.**

## Información importante

Eliminación de la pluma

Almacenamiento y Manejo

Preguntas Frecuentes

Otra información

Dónde obtener más información

## Eliminación de sus Plumas usadas

- Coloque sus plumas usadas en un recipiente para objetos punzocortantes aprobado por la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA) inmediatamente después de su uso. **No deseche (elimine) Plumas en la basura de su hogar.**
- Si no dispone de un recipiente para eliminación de objetos punzocortantes aprobado por la FDA, puede usar un recipiente doméstico que cumpla con los siguientes requisitos:
  - esté hecho de plástico de alta resistencia;
  - pueda cerrarse con una tapa ajustada y ser resistente a las perforaciones, de modo que los objetos punzantes no se puedan salir;
  - pueda colocarse en posición vertical y ser estable durante el uso;
  - sea resistente a derrames; y
  - tenga una etiqueta que advierta que el recipiente contiene residuos peligrosos.
- Cuando su recipiente para eliminación de objetos punzantes esté casi lleno, deberá seguir las normas de la comunidad para desechar su recipiente correctamente. Pueden existir leyes locales o estatales sobre cómo eliminar agujas y jeringas usadas. Para obtener más información sobre la eliminación segura de objetos punzantes e información específica sobre la eliminación de objetos punzantes en el estado en el que reside, visite la página web de la FDA: <http://www.fda.gov/safesharpsdisposal>.
- **No recicle el recipiente usado.**



## Almacenamiento y Manejo

- Guarde su pluma en el refrigerador entre 36 °F y 46 °F (2 °C a 8 °C).
- Puede almacenar su pluma a temperatura ambiente inferior a 86 °F (30 °C) hasta un máximo de 14 días.
- No congele su pluma. Si la pluma se ha congelado, deséchela y use una nueva.
- Se recomienda almacenar su pluma en la caja original. Proteja la pluma de la exposición directa al calor y la luz.
- La pluma tiene partes de vidrio. Manipúlela con cuidado. Si la deja caer sobre una superficie dura, no la use. Use una nueva pluma para su inyección.
- Mantenga su pluma TRULICITY y todos los medicamentos lejos del alcance de los niños.

## Preguntas Frecuentes

### ¿Qué pasa si veo burbujas de aire en mi pluma?

Las burbujas de aire son normales.

### ¿Qué pasa si desbloqueo la pluma y presiono el botón verde de la inyección antes de quitar la tapa de la base?

No retire la tapa de la base. Tire la pluma y use una nueva.

**¿Qué pasa si hay una gota de líquido en la punta de la aguja cuando quito la tapa de la base?**

Una gota de líquido en la punta de la aguja es normal.

**¿Debo mantener presionado el botón de la inyección hasta administrar completamente la inyección?**

No es necesario, pero puede ayudarlo a mantener la pluma firme y estable contra su piel

**Escuché más de 2 clics durante la inyección – 2 clic fuertes y 1 suave. ¿Me administré la inyección completa?**

Algunas personas pueden escuchar un clic suave justo antes del segundo clic fuerte. Es el funcionamiento normal de la pluma. No quite la pluma de su piel hasta escuchar el segundo clic fuerte.

**¿Qué pasa si hay una gota de líquido o sangre en mi piel después de aplicar la inyección?**

Es normal.

**No estoy seguro de que la pluma funcione bien.**

Verifique si ha recibido la dosis. Su dosis se administró correctamente si el émbolo gris es visible (ver paso 3). Comuníquese con Lilly al 1-800-Lilly-Rx (1-800-545-5979) para obtener más instrucciones. Hasta entonces, almacene su pluma de forma segura para evitar un pinchazo accidental.

**Otra información**

- Si tiene problemas de visión, no use la pluma sin ayuda de alguien capacitado para usar la pluma TRULICITY.

**Dónde obtener más información**

- Si tiene preguntas o problemas con su pluma de dosis única TRULICITY, comuníquese con Lilly al 1-800-Lilly-Rx (1-800-545-5979) o llame a su proveedor de atención médica.
- Para ver más información sobre la pluma de dosis única TRULICITY, visite nuestro sitio web en: [www.trulicity.com](http://www.trulicity.com).

Estas Instrucciones de Uso han sido aprobadas por la Administración de Medicamentos y Alimentos de EE. UU.



Eli Lilly and Company  
Indianápolis, IN 46285, USA

Número de licencia en Estados Unidos 1891

TRULICITY es una marca registrada de Eli Lilly and Company.

Copyright © 2020, Eli Lilly and Company. Todos los derechos reservados.

La pluma TRULICITY cumple con los requisitos actuales de funcionamiento y precisión en la dosis conforme a ISO 11608-1:2012 y 11608-5:2012.

Aprobado: 09/2020.

TRU4.5MG-0001-IFU-20200903

PP-DG-US-4751